




Kiilto Pro Erinox

Specialrengøringsmiddel

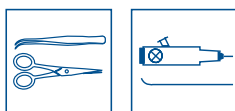

Lavtskummende rengøringsmiddel til manuel rengøring af instrumenter og udstyr samt til anvendelse i ultralydsbade.

Anvendelsesområde

Til rengøring af kirurgiske instrumenter inden desinfektion, herunder fleksible og stive endoskoper, sarte og følsomme instrumenter der anvendes i sundhedssektoren og dentalbranchen samt til skrøbeligt glas og laboratorieudstyr. Anvendes manuelt eller i ultralydsrensere.

Medicinsk udstyr til professionel brug.

Produktegenskaber

Lavtskummende rengøringsmiddel specielt udviklet til skånsom rengøring af følsomme instrumenter. Fjerner effektivt organisk materiale som fedtsmuds og kropsvæsker. Også effektivt til instrumenter og udstyr med små hulrum.

Kan anvendes på de fleste materialer som aluminium, glas og plastic.

Brugsanvisning

Lav en opløsning af Erinox specialrengøring i henhold til anvisningen.


Manuel rengøring:

Rengør instrumenterne grundigt, iblødsætning ved behov. Skift opløsning efter hver rengøring. Skyl instrumenterne med rent vand efter rengøring og tør dem.

Ultralydsrensere:

Placer instrumenterne løst i ultralydsrenseren. Skyl instrumenterne med rent vand efter vask. Desinficer instrumenterne efterfølgende ved behov.

Brugsanvisning	Opløsning	Erinox	Vand	Bemærkning
Ultralydsrensere	1 -2%	10-20 ml	1 liter	Udskift opløsningen 1-2 gange dagligt Iblødsætning 2% ved behov
Manual rengøring:				
Endoskoper	2%	20 ml	1 liter	
Andre instrumenter og udstyr	1-2%	10-20 ml	1 liter	Udskift opløsning efter hver rengøring
Meget snavsede instrumenter	5%	50 ml	950 ml	

Indhold	Ingrediens	Effekt		
	Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5%	Vaskeaktivt stof, opløser snavs		
	Polycarboxylat <5%	Rengørende effekt, opløser snavs og binder det til vandet		
pH produkt	10.0			
pH brugsopløsning	10.0			
Opbevaring	Opbevares ved 5-35°C. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.			
Udseende og duft	Klar væske.			
Produktionsland	FINLAND			
Anvendelses- og miljø sikkerhed	<p>Alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til asiakaspalvelu@kiilto.com og den lokale myndighed for medicinsk udstyr (Lægemiddelstyrelsen).</p> <p>Læs brugsanvisning før brug. Sikkerhedsinstruktioner findes på produktets sikkerhedsdatablad.</p>			
Emballagematerialer	Emballagen er fremstillet af HDPE plast, som er et genanvendeligt materiale.			
Forpackingsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)
	6 x 1 l	8113	6417964081138	6417964483536
	3 x 5 l	8114	6417964081145	6417964483543
Øvrig information	 <p>Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.</p>			